

Ciśnieniomierze DuraShock™ Welch Allyn®

Dokładniejsze
i tańsze pomiary
ciśnienia krwi



Precyzyjny



Trwały



Lekki




Prosty
w obsłudze

WelchAllyn®


Advancing Frontline Care™

Pełna gama ciśnieniomierzy wykorzystujących innowacyjną technologię DuraShock opracowaną przez Welch Allyn.

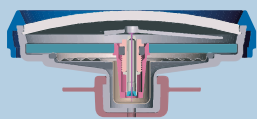

Innowacyjna technologia DuraShock

W tradycyjnych ciśnieniomierzach aneroidowych system czułych przekładni i sprężyn przenosi pionowy ruch membrany na obrotowy ruch wychylający wskazówkę. Bezprzekładniowy ciśnieniomierz DuraShock wyposażony jest w pojedynczą, spiralną sprężynę bezpośrednio przekształcającą pionowy ruch membrany na wychylenie wskazówki, eliminując złożony system przekładni.

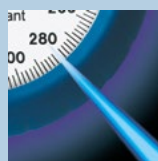

Laserowo grawerowana skala

Wszystkie ciśnieniomierze Welch Allyn linii Srebrnej i Złotej wyposażyliśmy w komputerowo kalibrowany manometr z mechanizmem DuraShock oraz laserowo grawerowaną skalę, zapewniając wyjątkowo precyzyjny odczyt wyników pomiaru. Dzięki opatentowanemu przez Welch Allyn procesowi produkcji oferujemy Państwu ciśnieniomierze o nieporównywalnej dokładności.

Ciśnieniomierze z zaworem spustowym

seria 60

Złota linia

Wszystkie produkty należące do linii Złotej cechuje:

- Wzmocniony system pomiarowy – dłuższa trwałość.
- Laserowo grawerowana skala – większa dokładność pomiaru.
- Odporność na wstrząsy – większa dokładność, niższe koszty obsługi.
- 15 letnia gwarancja kalibracji.
- unikalne wzornictwo.

Złota linia



DS66

Model DS66 DuraShock to jeden z dwóch najwyższej klasy modeli z najnowszej serii produktów Welch Allyn. Poza wyszczególnionymi obok cechami, DS66 posiada płynnie regulowany zawór spustowy oraz ergonomiczny kształt. Dodatkowo ciśnieniomierz wyposażony jest w miękkie wkładki z tworzywa sztucznego zwiększające komfort pomiaru.

Srebrna linia

Wszystkie mierniki należące do linii Srebrnej cechuje:

- laserowo grawerowana skala – większa dokładność pomiaru.
- odporność na wstrząsy – większa dokładność, niższe koszty obsługi.
- 10 letnia gwarancja kalibracji.
- unikalne wzornictwo.

Srebrna linia



DS65

Poza wymienionymi obok cechami DS65 posiada płynnie regulowany zawór spustowy oraz etykiety z miejscem na wpisanie informacji identyfikacyjnych, np. logo, nazwy szpitala, oddziału itp.

Brązowa linia

Wszystkie produkty należące do linii Brązowej cechuje:

- odporność na wstrząsy – większa dokładność, niższe koszty obsługi.
- 5 letnia gwarancja kalibracji.

Brązowa linia

Linia wstrząsoodpornych ciśnieniomierzy aneroidowych firmy Welch Allyn, w których zastosowano technologię DuraShock oferuje praktyczne korzyści w porównaniu z ciśnieniomierzami tradycyjnymi. Dotyczy to zwłaszcza ośrodków zdrowia intensywnie korzystających z aparatury medycznej, gdzie trwałość sprzętu medycznego ma szczególne znaczenie.

Dzięki technologii DuraShock ciśnieniomierze firmy Welch Allyn:

- utrzymują kalibrację dłużej niż tradycyjne manometry, co gwarantuje zwiększoną dokładność odczytu.
- nie wymagają tak częstych napraw, jak tradycyjne ciśnieniomierze, co obniża koszty utrzymania.
- jako jedyne wyposażone są w manometr spełniający normy AAMI dotyczące odporności na wstrząsy – wytrzymuje upadek na twardą powierzchnię z wysokości 76 cm nie wymagając ponownej kalibracji.

Ciśnieniomierze ręczne

seria 50



DS56

Model DS56 DuraShock to jeden z dwóch najwyższej klasy modeli z najnowszej serii ciśnieniomierzy Welch Allyn. Poza wymienionymi cechami Linii Złotej, DS56 posiada zawór obrotowy z wygodnym uchwytem z tworzywa oraz plastikowy pierścień chroniący tarczę przed uszkodzeniem.

Ciśnieniomierze zintegrowane

seria 40



DS55

Poza wymienionymi cechami Linii Srebrnej, ciśnieniomierz DS55 posiada zawór obrotowy oraz etykiety umożliwiające wpisanie nazwy użytkownika lub logo. DS 55 oferowany jest w czterech kolorach: niebieskim, żółtym, czerwonym i czarnym.



DS45

Poza wymienionymi cechami Linii Srebrnej, ciśnieniomierz DS45, charakteryzuje się unikalnym zintegrowanym systemem mocowania manometru w mankiecie, przez co jest on mniejszy, lżejszy i prostszy w obsłudze. Manometr posiada możliwość obrotu zegara o 360°, co umożliwia odczyt pomiaru pod dowolnym kątem. Miękka plastikowa osłona tarczy zegara stanowi dodatkowe zabezpieczenie, zaś duża gruszka pompki oraz wysokiej jakości zawór ułatwiają pomiar.



DS54

Poza wymienionymi cechami Linii Brązowej, ciśnieniomierz DS54 wyposażony jest w tradycyjny zawór obrotowy.



DS44

Poza wymienionymi cechami Linii Srebrnej, ciśnieniomierz DS44 charakteryzuje się unikalnym zintegrowanym systemem mocowania manometru w mankiecie, przez co jest on mniejszy i lżejszy. Manometr posiada możliwość obrotu zegara o 360°, co umożliwia odczyt pomiaru pod dowolnym kątem. Miękka plastikowa osłona tarczy zegara stanowi dodatkowe zabezpieczenie. Opcjonalnie do modelu DS 44 oferowane są wymienne pierścienie chroniące zegar, w czterech kolorach: niebieskim, fioletowym, czerwonym i zielonym.

Wytyczne i normy

Zintegrowany ciśnieniomierz aneroidowy DuraShock firmy Welch Allyn cechuje się dokładnością ± 3 mm Hg i spełnia następujące normy dla mierników aneroidowych:

- Amerykańska norma ANSI/AAMI SP10: 2002, Ciśnieniomierze manualne, elektroniczne lub automatyczne (Manual, electronic or automated sphygmomanometers)
- Amerykańska norma ANSI/AAMI SP09: 1994, Ciśnieniomierze nie automatyczne (Non-automated sphygmomanometers – tylko modele DS44 i DS45)
- Europejska norma EN 1060-1: 1995, Ciśnieniomierze nieinwazyjne, Część 1: Wymagania ogólne (Non-invasive sphygmomanometers, Part I: General Requirements)
- Europejska norma EN 1060-2: 1996, Ciśnieniomierze nieinwazyjne Część 2: Dodatkowe wymagania dla ciśnieniomierzy mechanicznych (Non-invasive sphygmomanometers, Part 2: Supplementary requirements for mechanical sphygmomanometers) (z wyłączeniem paragrafu 7.1.4.2.4 dotyczącego grubości jednostek skali i odległości pomiędzy jednostkami skali)
- Techniczne rozporządzenie metrologiczne INMETRO nr 24 z dnia 26 lutego 1996 r. (z wyłączeniem paragrafu 6.4 dotyczącego grubości wskazówki oraz paragrafu 6.8 dotyczącego odległości pomiędzy jednostkami skali)

Bezpieczeństwo oraz charakterystyka pracy ciśnieniomierza pozostaje niezmienna w zakresie temperatur od 10 do 40 °C przy wilgotności względnej nie przekraczającej 85% – 90%.

Złota linia produktów Welch Allyn

Linia doskonałej jakości ciśnieniomierzy, pracujących w oparciu o technologię DuraShock

Model DS66

Ciśnieniomierz ręczny z przyciskowym zaworem spustowym, pojedynczym przewodem i tarczą o średnicy 50 mm

| | |
|---------------|---|
| DS66-01-300 | Manometr bez akcesoriów |
| DS66-01-189 | Manometr z supertwałym jednoczęściowym mankietem na rzep dla dorosłych i futerałem z zamkiem błyskawicznym |
| DS66-01-189CB | Manometr z trwałym, zapinanym na rzep dwuczęściowym mankietem dla dorosłych, pompką i futerałem zamykanym na zamek błyskawiczny |
| 10-50-027 | Futerał na zamek błyskawiczny |

Model DS56

Ciśnieniomierz ręczny z zaworem obrotowym, pojedynczym przewodem i tarczą o średnicy 50 mm

| | |
|---------------|--|
| DS56-01-300 | Manometr bez akcesoriów |
| DS56-01-189 | Manometr z supertwałym jednoczęściowym mankietem na rzep dla dorosłych i futerałem na zamek błyskawiczny |
| DS56-01-189CB | Manometr z trwałym, dwuczęściowym mankietem na rzep dla dorosłych i futerałem na zamek błyskawiczny |
| 10-50-000 | Futerał z zamkiem błyskawicznym |

Ciśnieniomierz ręczny z zaworem obrotowym, podwójnym przewodem i tarczą o średnicy 50 mm

| | |
|---------------|--|
| DS56-02-300 | Manometr bez akcesoriów |
| DS56-02-189 | Manometr z supertwałym jednoczęściowym mankietem na rzep dla dorosłych i futerałem na zamek błyskawiczny |
| DS56-02-189CB | Manometr z trwałym, dwuczęściowym mankietem na rzep dla dorosłych i futerałem na zamek błyskawiczny |
| 10-50-000 | Futerał z zamkiem błyskawicznym |

Srebrna linia ciśnieniomierzy Welch Allyn

Linia wysokiej jakości ciśnieniomierzy wykorzystujących technologię DuraShock

Model DS65

Ciśnieniomierz ręczny z przyciskowym zaworem spustowym, pojedynczym przewodem i tarczą o średnicy 50 mm

| | |
|---------------|--|
| DS65-01-300 | Manometr bez akcesoriów |
| DS65-01-189 | Manometr z supertwałym jednoczęściowym mankietem dla dorosłych na rzep i futerałem na zamek błyskawiczny |
| DS65-01-189CB | Manometr z trwałym, dwuczęściowym mankietem dla dorosłych na rzep i futerałem na zamek błyskawiczny |
| 10-50-027 | Futerał z zamkiem błyskawicznym |

Model DS55

Ciśnieniomierz ręczny z zaworem obrotowym, pojedynczym przewodem i tarczą o średnicy 50 mm

| | |
|---------------|---|
| DS55-01-300 | Manometr bez akcesoriów z chromowanymi elementami wykończenia |
| DS55-41-300 | Jak wyżej z czerwonymi elementami wykończenia |
| DS55-21-300 | Jak wyżej z niebieskimi elementami wykończenia |
| DS55-61-300 | Jak wyżej z żółtymi elementami wykończenia |
| DS55-01-189 | Manometr z chromowanymi wykończeniem, supertwałym jednoczęściowym mankietem na rzep dla dorosłych i futerałem na zamek błyskawiczny |
| DS55-01-189CB | Manometr z chromowanymi wykończeniem, trwałym, dwuczęściowym mankietem na rzep dla dorosłych i futerałem na zamek błyskawiczny |
| DS55-41-149 | Jak wyżej z czerwonymi elementami wykończenia |
| DS55-21-129 | Jak wyżej z niebieskimi elementami wykończenia |
| DS55-61-169 | Jak wyżej z żółtymi elementami wykończenia |
| 10-50-000 | Futerał z zamkiem błyskawicznym |

Ciśnieniomierz ręczny z zaworem obrotowym, podwójnym przewodem i tarczą o średnicy 50 mm

| | |
|---------------|--|
| DS55-02-300 | Manometr bez akcesoriów z chromowanymi elementami wykończenia |
| DS55-02-189 | Manometr z supertwałym jednoczęściowym mankietem na rzep dla dorosłych i futerałem na zamek błyskawiczny |
| DS55-02-189CB | Manometr z trwałym, dwuczęściowym mankietem na rzep dla dorosłych i futerałem na zamek błyskawiczny |
| 10-50-000 | Futerał z zamkiem błyskawicznym |

Model DS45

Zintegrowany ciśnieniomierz mocowany na mankiet z tarczą o średnicy 50 mm

| | |
|-----------|---|
| DS45 | Manometr bez akcesoriów |
| DS45-11 | Manometr z supertwałym jednoczęściowym mankietem dla dorosłych, zapinanym na rzep |
| DS45-11CB | Manometr z trwałym, zapinanym na rzep dwuczęściowym mankietem dla dorosłych |
| 10-50-000 | Futerał z zamkiem błyskawicznym |

Braźnowa linia produktów Welch Allyn

Linia wysokiej klasy ciśnieniomierzy pracujących w oparciu o technologię DuraShock

Model DS54

Ciśnieniomierz ręczny z zaworem obrotowym, jednoprzewodowym mankietem i skalą o średnicy 50 mm

| | |
|---------------|--|
| DS54-01-300 | Manometr bez akcesoriów |
| DS54-01-189 | Manometr z supertwałym jednoczęściowym mankietem na rzep dla dorosłych i futerałem na zamek błyskawiczny |
| DS54-01-189CB | Manometr z trwałym, dwuczęściowym mankietem na rzep dla dorosłych i futerałem na zamek błyskawiczny |
| 10-50-000 | Futerał z zamkiem błyskawicznym |

Ciśnieniomierz ręczny z zaworem obrotowym, jednoprzewodowym mankietem i tarczą o średnicy 50 mm

| | |
|---------------|--|
| DS54-02-300 | Manometr bez akcesoriów |
| DS54-02-189 | Manometr z supertwałym jednoczęściowym mankietem na rzep dla dorosłych i futerałem na zamek błyskawiczny |
| DS54-02-189CB | Manometr z trwałym, dwuczęściowym mankietem na rzep dla dorosłych i futerałem na zamek błyskawiczny |

Model DS54 Home

Ciśnieniomierz ręczny zintegrowany ze stetoskopem do samodzielnego pomiaru z zaworem obrotowym, jednoprzewodowym mankietem i skalą o średnicy 50 mm

| | |
|-------------|--|
| DS54-01-300 | Manometr bez akcesoriów |
| DS54-01-187 | Manometr z trwałym, dwuczęściowym mankietem na rzep dla dorosłych, wbudowanym stetoskopem oraz futerałem na zamek błyskawiczny |

Model DS44

Manometr zintegrowany z mankietem z 50 mm tarczą

| | |
|-----------|---|
| DS44 | Manometr bez akcesoriów |
| DS44-11 | Manometr z supertwałym, jednoczęściowym mankietem na rzep dla dorosłych |
| DS44-11CB | Manometr z trwałym, zapinanym na rzep dwuczęściowym mankietem dla dorosłych |
| 10-50-000 | Futerał z zamkiem błyskawicznym |

Welch Allyn (Siedziba główna)

Tel: +1 315 685 4560 Or 800 535 6663
Fax: +1 315 685 0054

Welch Allyn Irlandia

(Obsługa klientów europejskich)
Tel: +353 46 906 7790
Fax: +353 46 906 7754

Welch Allyn Wielka Brytania

Tel: +44 (0) 207 365 6780
Fax: +44 (0) 207 365 9694

Welch Allyn Włochy

Tel: +39 (0) 2 6699 291
Fax: +39 (0) 2 6671 3599

Welch Allyn South Africa

Tel: +27 11 777 7509
Fax: +27 11 777 7510

Welch Allyn Niemcy

Tel: +49 (0) 7477 9271 0
Fax: +49 (0) 7477 9271 90

Welch Allyn Francja

Tel: +33 (0) 1 60 09 3366
Fax: +33 (0) 1 60 09 6797

Welch Allyn Hiszpania

Tel: +34 91 386 3047
Fax: +34 91 386 1029

Welch Allyn Szwecja

Tel: +46 (0) 42 33 02 20
Fax: +46 (0) 42 33 32 10

Welch Allyn Polska

Tel./Fax: +48 61 828 14 32
Tel. kom. +48 605 769 917
E-mail: malinowski@welchallyn.com

Dystrybutor Welch Allyn

Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k.
Tel: +48 22 313 09 39
Fax: +48 22 313 09 59

WelchAllyn[®]

Advancing Frontline Care™

DURASHOCK: 0114wer.04