


Deska ortopedyczna NAJO Lite

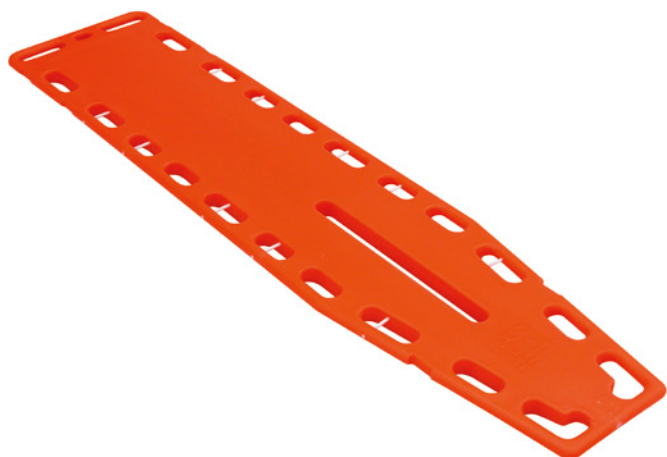

OPIS PRODUKTU:

Deska ortopedyczna z polietylenu wypełniona pianką poliuretanową. Posiada podłużny otwór pozwalający na unieruchamianie każdej nogi oddzielnie. Liczne otwory pozwalają na zastosowanie różnych sposobów unieruchomienia pacjenta. Wbudowane w otwory sworznie umożliwiają zaczepienie uprząży do wyciągarki. Ścięte zakończenie od strony nóg umożliwia łatwe manewrowanie w wąskich przestrzeniach, zaś gładka powierzchnia umożliwia delikatne przesuwanie pacjenta. Deska dostępna jest w wersji z unieruchomieniem głowy i pasami. Najo wykonana jest z materiałów przenikliwych dla promieni X.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Obciążenie maksymalne 204 kg
- Waga: 6,6 kg
- Wymiary: 183 x 41 x 4,5 (dł. x szer. x wys.)

Uniwersalny system unieruchomienia głowy 445



OPIS PRODUKTU:

Przystosowany jest do współpracy z niemal każdym rodzajem desek ortopedycznych. Głowa pacjenta spoczywa na miękkiej podkładce pomiędzy dwoma klockami, posiadającymi otwory na wysokości uszu poszkodowanego. Dodatkowo stabilizację zapewniają paski: czołowy i podbródkowy. Unieruchomienie wykonane jest z materiałów przenikliwych dla promieni X i pokryte tworzywem wodoodpornym.

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-815 Warszawa; ul. Żołny 11; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl

Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

